

Bedienungsanleitung



Vielen Dank für den Kauf des *ROLANDUS*-Produkts!

Um dieses Produkt ordnungsgemäß verwenden zu können, lesen Sie bitte vor der Verwendung diese Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf, damit Sie sie bei Bedarf jederzeit lesen und zu Hilfe nehmen können.

Über diese Bedienungsanleitung:

Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Produktbilder und Einführungen in die zugehörigen Produktfunktionen, sowie die Erklärungen einiger Begriffe dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt ist maßgeblich, wenn der Benutzer es verwendet, und die angegebenen Daten stammen aus dem Labor des Unternehmens.

1. - Sicherheitsvorkehrungen:

Lesen Sie vor der Verwendung unbedingt die Sicherheitshinweise.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt ordnungsgemäß gemäß den Inhalten und Empfehlungen der Bedienungsanleitung.

ACHTUNG ! Gefahr von Verletzungen besteht bei falscher Bedienung!

Bitte beachten, dass bei falschem Betrieb Personen- + Sachschäden entstehen können!

---Bitte verwenden Sie das mit diesem Produkt mitgelieferte Ladekabel oder ein Ladekabel, das den Produktspezifikationen entspricht, und schließen Sie den Stecker des Ladekabels ordnungsgemäß an die Haushaltssteckdose, um Fehlfunktionen, Feuer oder Brand durch Hitze zu vermeiden.

--- Da dieses Produkt über einen eingebauten Li-Akku verfügt, dürfen Sie es nicht ins Feuer werfen oder in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder großer Hitze verwenden, da es sonst zu Fehlfunktionen, Feuer oder Hitzebrand kommen kann.

---Öffnen Sie das Gerät niemals selbst.

---Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß oder verformt oder beschädigt ist oder einen eigenartigen Geruch aufweist, verwenden Sie es nicht erneut, um das Risiko eines Stromschlags und Brandes zu vermeiden.

▲ Wichtiger Hinweis:

---Dieses Produkt ist ein persönliches Wellness-Massageprodukt und kann somit keine Medikamente oder medizinischen Geräte ersetzen.

--- Dieses Produkt ist nicht für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Problemen oder mangelnder Erfahrung und ohne gesunden Menschenverstand (einschließlich Kinder) geeignet, es sei denn, ein Erziehungsberechtigter beaufsichtigt und leitet die Verwendung des Produkts und kann die Verantwortung für die Sicherheit der Benutzer übernehmen.


Wichtige Hinweise vorab:

- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verpackungsmaterialien (z. B. Plastiktüten) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn die Maschine beschädigt ist oder das Produkt nicht normal funktioniert, muss sie zur Vermeidung von Gefahren von Fachkräften des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder ähnlichen Abteilungen repariert werden.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie daher, dass während der Verwendung Wasser auf/an die Oberfläche des Produkts spritzt. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht beim Baden.
- Schalten Sie die Maschine bei Reinigungsarbeiten bitte komplett aus und führen Sie die Arbeiten im ausgeschalteten Zustand durch. Nehmen Sie dazu ein einfaches Mikrofasertuch.
- Lagern oder verwenden Sie dieses Produkt nicht in einem Badezimmer oder anderen feuchten Räumen.
- Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen und entflammaren Orten, da es dadurch bedingt anfällig für Störungen und Gefahren ist und leicht zu Verformungen, Verfärbungen oder Beschädigungen kommen kann.
- Sollten Sie während der Verwendung des Geräts irgendwelche Unregelmäßigkeiten feststellen, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein und kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Sollten Sie bei der Verwendung dieses Geräts körperliche Anomalien oder Schmerzen feststellen, brechen Sie die Verwendung sofort ab und wenden Sie sich an einen Hautarzt; Facharzt für Dermatologie.
- Das Gerät wird nicht empfohlen für Personen mit Dermatitis, Psoriasis, Hautschäden, Ekzemen, Schwellungen, Verwundungen usw.

2. Einführung

Das elektrische Massage-Schönheitsinstrument ist ein Hautmassage- und Pflegeprodukt, das Wärme, Vibration, Farblicht und Mikroelektrizität kombiniert. Das Produkt basiert auf Ergonomie und integriert verschiedene Kurvendesigns. Durch heiße Kompressen und hochfrequente Mikrovibrationen, die auf den menschlichen Körper einwirken, kann es die Aufnahme von Pflegeprodukten (z.B. Serum, Öle) fördern. Es massiert nicht nur, sondern kratzt leicht auch am Körper und drückt auf Akupunkturpunkte, sodass die Muskeln bequem massiert und die Haut gedehnt werden können. Mit Hautverjüngung, -straffung, Einschleusung von Pflegeprodukten, sowie zusätzlichen Schönheitseffekten werden verschiedene Hautprobleme effektiv verbessert und Ihre Haut perfekt geformt.

3. - Wie verwendet man das Massagegerät...

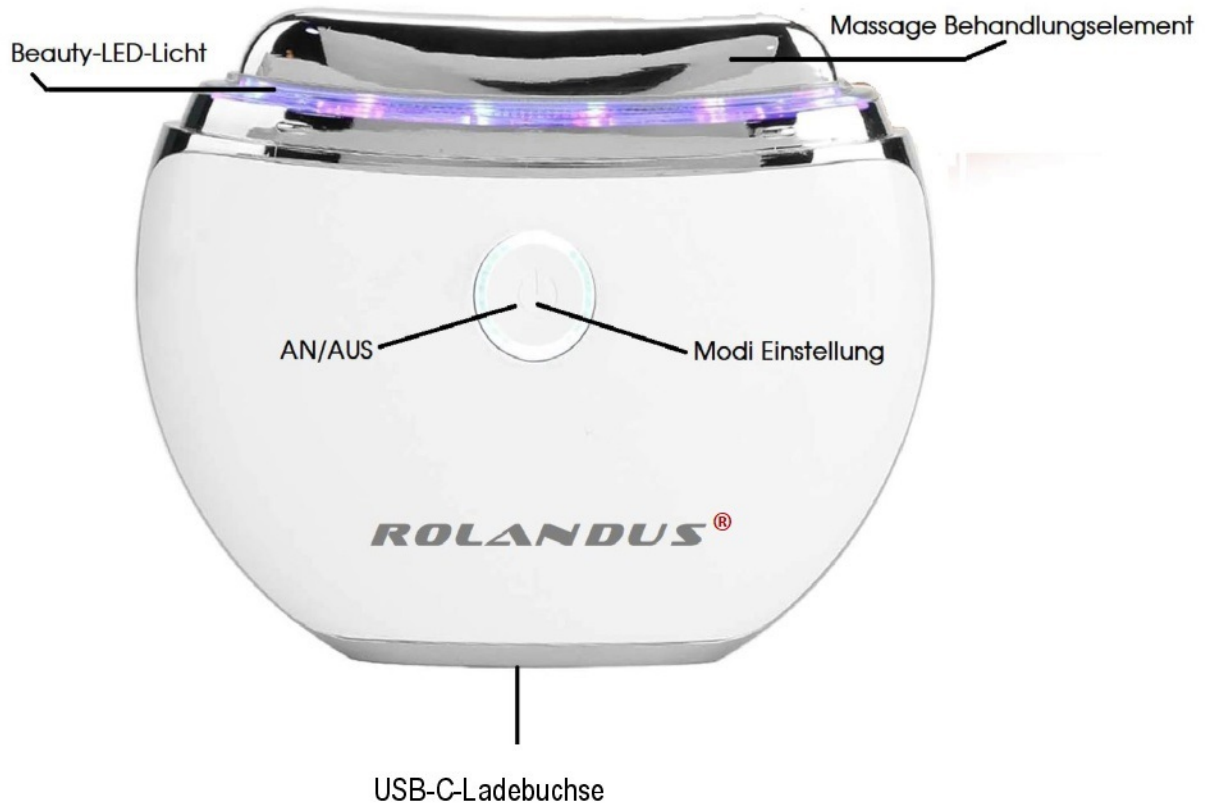

Das Produkt schaltet sich in jedem Modus nach 10 Minuten ohne Betrieb automatisch ab

Wie ist das Massagegerät zu verwenden?

[Bedienungsanleitung für das Gerät]

AN/AUS-Taste

Drücken und halten Sie diese Taste, um das Gerät zu starten! (AN)

- Im eingeschalteten Zustand kann jeder Modus durch kurzes Drücken geändert werden, und die entsprechende Modus-Anzeige leuchtet auf (die folgenden 4 Modi sind verfügbar: Wärme, Vibration, Mikrostrom und LED-Licht).
- Halten Sie diese Taste nach dem Einschalten der Maschine in einem beliebigen Modus 2 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten (AUS).

4. Funktionen

• Wärme + Rotlicht

Das Rotlicht erwärmt die Haut, öffnet die Poren und aktiviert die unteren Hautzellen; fördert somit die Durchblutung und strafft Haut.

• Wärme + Vibration + Violette Licht

Das violette Licht ist eingeschaltet. Die zusätzliche Vibrationsmassage lindert Müdigkeit und strafft die Haut. Es fördert den Stoffwechsel der Lymphe und verbessert sehr gut dunklere Haut.

• Mikrostrom + Vibration + blaues Licht

Das Beautylicht ist blau. Es weckt die Hautkontraktionsspannung und verbessert die Talgproduktion. Hilft bei der Aufnahme von Nährlösungen/Pflegeprodukten und macht die Haut glatt und zart.

• Wärme + (EMS) Mikrostrom + Vibration + Rotlicht und gleichzeitig blaues Licht.

Die rote und blaue Schönheitslampe stimuliert abwechselnd die Kollagenstruktur der Haut. Allgemeine Verbesserung des Hautzustands.

[Aufladung]

Laden Sie das Massagegerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

--Verbinden Sie das Gerät mit dem Ladekabel und einem Ladegerät und stecken Sie es in eine Haushaltssteckdose mit 220V. Während des Ladevorgangs blinkt das LED-Licht am Rande des Einschaltknopfs.

--Bei vollständiger Aufladung blinkt das LED-Licht am Rand des Einschaltknopfs nicht mehr.

--Achtung! Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.


[Vorbereitung vor dem Gebrauch]

Wählen Sie die für Sie passende Lotion (Pflegeprodukte z.B. Serum, Öle u.s.w.) und tragen Sie diese gleichmäßig auf die zu behandelnde Stelle auf. Beginnen Sie dann mit der Anwendung Ihrer Wahl. Bitte auf sauberer Haut oder nach dem Baden/Duschen anwenden.

[Reinigung nach dem Gebrauch]

Wischen Sie die Maschine mit einem weichen Tuch oder Wattepad sauber.

Ganzkörpermassagen...

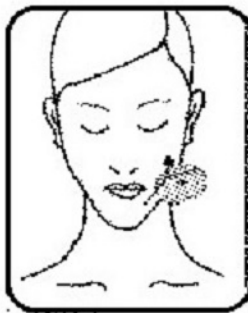

Gesichtsmassage

Wählen Sie den Modus entsprechend Ihren Bedürfnissen; sofern es vom Kinn aus zur Wange zum Ohr geht, bitte nur aufwärts streichen.




Augenmassage

Wählen Sie den Modus entsprechend Ihren Bedürfnissen aus; führen Sie die Aufwärtsbewegungen außerhalb der Augenpartie aus und vermeiden Sie den Kontakt mit den Augenlidern oder den Augen direkt.




Schulter- + Nackenmassage

Wählen Sie den Modus entsprechend Ihren Bedürfnissen. Streichen Sie nun von der Schulter bis zum oberen Hals; immer nur von unten nach oben.

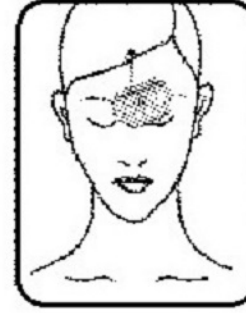


Stirnmassage

Wählen Sie die aus Modus nach Ihren Bedürfnissen aus. Gleiten Sie nun mit Aufwärtsbewegungen über Ihre Stirn; immer von unten nach oben bis zum Haaransatz.

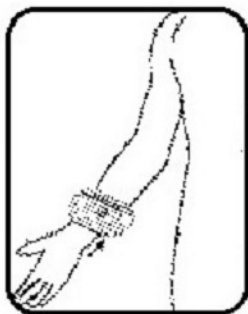

Handmassage


Wählen Sie den Modus nach Ihren Bedürfnissen und gleiten Sie über Ihren Unterarm zur Hand.

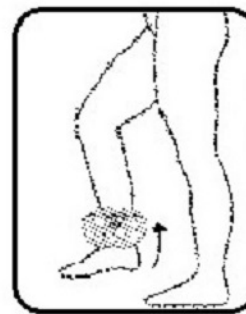

Beinmassage

Wählen Sie den Modus entsprechend Ihren Anforderungen aus. Gleiten Sie über Ihre Waden, Oberschenkel und Füße.


Gerät richtig führen...

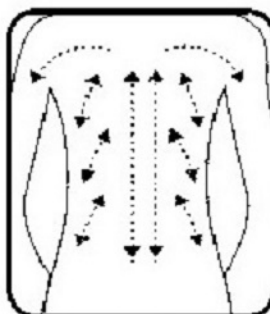


Rücken

Rückenmassage

Wählen Sie den Modus entsprechend Ihren Bedürfnissen aus und streichen von unten nach oben und zurück. Dabei kann es ruhig „kratzen“, damit die Blutgefäße aktiviert werden und die Faszien sich lockern.

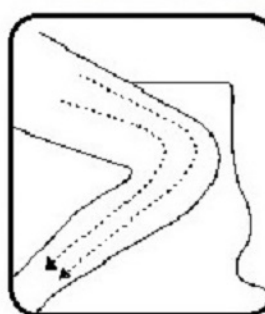

Beine

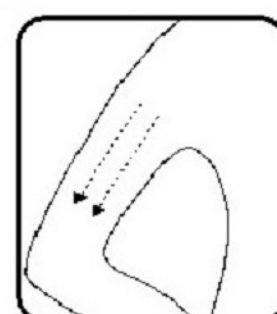

Arme

Schönheit für Ihr Gesicht



1. Reinigung



2. Lotion/Öle



3. Wärmestraffung



4. Gesichtsmaske

V-Gesichtslifting + -straffung



Schieben Sie die seitliche Kinnmuskulatur nach oben entlang der Kieferlinie bis kurz unter die Augen.



Reduzieren Sie Falten indem Sie das Gerät vom Nasenflügel und Mundwinkel über die äußere Kontur des Wangenknochens bis zum Ohrläppchen ziehen.



Stirnfalten reduzieren.
Beginnen Sie oberhalb der
Augenbrauen und ziehen das
Gerät hoch bis zum Haaransatz.



Tränensäcke beseitigen.
Beginnen Sie vorsichtig unterhalb
der Augenwinkel und folgen den
Rundungen der Augen bis hin
zur Schläfe.

5. Wartung und Instandhaltung

- Bitte schalten Sie das Massagegerät vor der Reinigung komplett aus.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie keine scharfen, ätzenden oder flüchtigen Reinigungsmittel. Sie können zum vorsichtigen Abwischen ein feuchtes, weiches Tuch oder ein Wattepad verwenden.
- Spülen Sie das Gerät nicht direkt mit Wasser ab, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.

6. Angelegenheiten, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern

- Dieses Produkt ist ein Pflegeinstrument, kein medizinisches Gerät und hat keine therapeutische Wirkung. Wenn Sie eine Behandlung, Medikamente usw. benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Facharzt oder eine entsprechend ausgebildete Person.
- Wir bieten auf das Produkt eine 1-jährige Garantie. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. **Die Garantie gilt nicht für Preisreduzierte Ebay Ware im Privatverkauf!**
- Während der Garantiezeit ersetzen wir je nach Sachlage Teile oder das gesamte Produkt nur aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern.
- Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss das Produkt und der Kaufbeleg (Kaufrechnung), in der das Kaufdatum belegt ist, an den Rolandus-Kundendienst geschickt werden. Die Adresse finden Sie auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

--- Das Unternehmen kann leider keine Garantie für die folgenden Bedingungen übernehmen:

--- Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch, wie z. B.: Verwendung des falschen Netzteils, Anschluss des Geräts an eine ungeeignete Steckdose oder von Menschen eigens verursachte Schäden z.B.: selbst versuchter Reparatur, Lagerung auf ungeeigneten Flächen Z.B.: Heizung, Herde, Öfen usw. sowie Beschädigungen durch Stöße oder Bodenkontakt durch fallenlassen.

--- Die Alterung und Abnutzung des Geräts wird durch normale Verwendung verursacht, hat jedoch kaum Auswirkungen auf die Gebrauchsfunktion des Produkts.

--- Verwendung für andere Zwecke, unsachgemäße Bedienung, nicht fachgerechte Wartung oder Verwendung von Zubehör anderer Hersteller als das Original, was zu Produktproblemen führt.

--- Verbrauchsmaterialien, Zubehör und sonstiges Verbrauchszubehör.

--- Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden (wie Blitzschlag, Erdbeben, Feuer, Überschwemmung usw.).

Schäden, die aus den oben genannten Gründen entstanden sind, werden vom Kundendienst leider nicht abgedeckt. Sorgen Sie in diesem Fall für eine ordnungs-gemäße Entsorgung.

7. Abfallbehandlung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunal-/Gemeindeverwaltung erhalten. Selbstverständlich können Sie Ihre Rolandus-Altgeräte auch direkt an uns retournieren. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu. Weitere Informationen zum ElektroGesetz finden Sie auf www.elektrogesetz.de.

Rolandus-E-Commerce – Syker Strasse 24 – D-28816 Stuhr – WEEE Reg: 89188571

8. Umweltschutz



Diese Kennzeichnung auf diesem Produkt oder Verpackungsmaterial bzw. Zubehör weist darauf hin, dass dieses Material aus wiederverwertbaren Materialien besteht. Sortieren Sie Abfälle in verschiedene Recyclingklassen, um das Recycling nützlicher Materialien zu erleichtern.

9. Technische Parameter und Verpackung

Produktname: **ROLANDUS - EMS-GuaSha Massageinstrument**

-- Abmessungen:	95 x 90 x 21 mm
--Ladezeit:	ca. 90 Minuten
--Entladezeit:	ca. 80 Minuten
--Nettogewicht:	77,5 g;
--Material:	ABS + PC + Zinklegierung + Silikon;
--Lademethode:	USB-Kabel Typ C, 5 V/1 A;
--Wasserdichtigkeit:	IPX0
--Packliste:	o.g. Massageinstrument 1 x , USB-Ladekabel 1 x , Handbuch 1 x

Hinweis: Im Hinblick auf die konsequente Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor etwaige Produktspezifikationen zu ändern.

ROLANDUS®

EMS Gua Sha Elektrisch
Model / Modell: FY-Z2401DL
Power / Leistung : 5W
Battery output / Batterieleistung : DC 5V
Adapter output / Adapterausgang: DC 5V 1A

MADE IN CHINA
DESIGNED IN GERMANY
IMPORTER / IMPORTEUR:
ROLANDUS E-COMMERCE
SYKER STR 24,28818 STUHR / GERMANY
Email: rolandus@mail.de





ou



+



Points de collecte sur www.quifairendesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Download-Adresse der CE-Zertifizierung:
<https://drive.google.com/drive/folders/18VsGzfAy5pFfOopSWjPGFc4zWPORfete?usp=sharing>