


Heiß&Kalt Beauty Gesicht&Hals

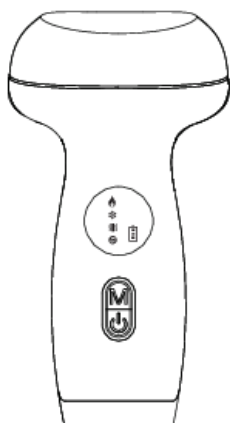

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts! Um dieses Produkt korrekt zu verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie sie bei Bedarf jederzeit nachlesen können.

Über diese Anleitung:

Die in dieser Anleitung gezeigten Produktbilder und zugehörigen Produkteigenschaften sowie die Erklärungen einiger Begriffe dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt ist maßgebend, wenn der Benutzer es verwendet, und die zitierten Daten stammen aus dem Labor des Unternehmens.

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise vor der Verwendung. Bitte verwenden Sie dieses Produkt entsprechend den Inhalten und Empfehlungen der Anleitung.

⚠ Gefahr	Falsche Bedienung kann zu Personenschäden führen
⚠ Hinweis	Falsche Bedienung führt zu Personen- oder Sachschäden

⚠ Gefahr

Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel oder ein Ladekabel, das den Produktspezifikationen entspricht, und schließen Sie den Ladestecker korrekt an die Haushaltssteckdose an, um Fehlfunktionen, Brand oder Überhitzung zu vermeiden.

Da dieses Produkt einen eingebauten Akku enthält, setzen Sie es keinem Feuer aus und verwenden Sie es nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder starker Hitze, da dies zu Fehlfunktionen, Brand oder Überhitzung führen kann.

Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß ist, sich verformt hat, beschädigt ist oder einen seltsamen Geruch aufweist, verwenden Sie es nicht mehr, um das Risiko eines elektrischen Schlags und Brandes zu vermeiden.

⚠ Hinweis

Dieses Produkt ist ein persönliches Massagegerät und kann keine Medikamente oder medizinischen Geräte ersetzen.

Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen mit körperlichen,

sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und fehlendem Verständnis (einschließlich Kinder), es sei denn, sie werden von einer aufsichtsführenden Person bei der Verwendung des Produkts beaufsichtigt und angeleitet, die die Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen kann. Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie Plastiktüten) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Wenn das Gerät beschädigt ist oder nicht normal funktioniert, muss es zur Vermeidung von Gefahren von Fachpersonal des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder ähnlichen Abteilungen repariert werden.

Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Verhindern Sie daher bei der Verwendung Wasserspritzer auf der Produktoberfläche. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht beim Baden.

Schalten Sie das Gerät bei Reinigung und Wartung aus und führen Sie diese im ausgeschalteten Zustand durch.

Bewahren Sie dieses Produkt nicht im Badezimmer oder anderen feuchten Räumen auf und verwenden Sie es dort nicht.

Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen und entflammaren Orten auf, da es anfällig für Störungen und Gefahren ist und leicht zu Verformung, Verfärbung oder Beschädigung führen kann.

Wenn Sie während der Verwendung Auffälligkeiten am Gerät bemerken, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Werkkundendienst.

Wenn Sie während der Verwendung körperliche Beschwerden oder Schmerzen verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt.


Nicht empfohlen für Menschen mit Dermatitis, Hautschäden, Ekzemen, Schwellungen etc.

2. Einführung

Das Heiß-Kalt-Beauty-Halsgerät ist eine Kombination aus Wärmeanwendung, Vibration, Kühlung, Massage, sieben Lichtfarben und Gua Sha in einem Hautmassagepflegeprodukt. Das Produkt basiert auf der ergonomischen Integration

verschiedener Kurvendesigns und wirkt durch den heißen Massage-Modus und den kühlenden zusammenziehenden Modus auf den Körper. Es wird auch für Massage und Gua Sha am Körper und an bestimmten Punkten verwendet, sodass die Muskeln angenehm massiert werden können.

3. Teilename

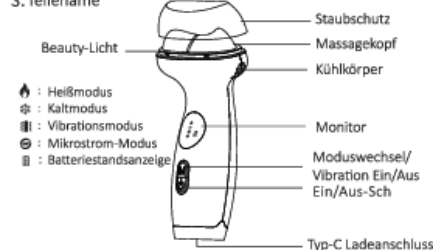

4. Bedienung

(I) Funktionsmodi

1. Modus 1: Heißkompress + rotes Licht + Vibration (Standard-Einschaltmodus);
2. Modus 2: Heißkompress + grünes Licht + Vibration;
3. Modus 3: Heißkompress + gelbes Licht + Vibration;
4. Modus 4: Kaltkompress + grünes Licht + Vibration;
5. Modus 5: Kaltkompress + blaues Licht + Vibration;
6. Modus 6: Mikrostrom + violettes Licht + Vibration;
7. Modus 7: Mikrostrom + weißes Licht + Vibration;
8. Nach dem Einschalten können Sie durch langes Drücken der M-Taste in jedem Modus die Vibration ein-/ausschalten; nach dem Ausschalten des Kaltkompressionsmodus wird der Kühlventilator mit einer Verzögerung von 30 Sekunden ausgeschaltet.

(II) Energiesparmodus: Wenn die 2 Elektroden des Beauty-Kopfes nicht in Kontakt mit der Haut sind, befindet sich das Produkt im Standby-Modus.

(III) Betriebszeit: Im Standby-Modus schaltet sich das Gerät nach 1 Minute automatisch aus. Im Heißkompressionsmodus

und Mikrostrom-Modus schaltet sich das Gerät ohne Tastenbedienung nach 10 Minuten automatisch aus; im Kaltkompressionsmodus ohne Tastenbedienung nach 5 Minuten automatisch aus;

(III) Verwendung

-Drücken Sie  etwa 1 Sekunde lang, um das Gerät ein-/auszuschalten.

-Nach dem Einschalten kurz M drücken, um den Modus zu wechseln, Moduszyklus 1-2-3-4-5-6-7-1;

-Nach dem Einschalten M lange drücken, um die Vibrationsfunktion ein-/auszuschalten.

-Automatischer Signalton bei Abschaltung.

-Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

-Bei niedrigem Akkustand

-Verbinden Sie das Gerät mit dem Ladekabel und Netzteil und stecken Sie es in eine Haushaltssteckdose;

-Während des Ladevorgangs blinkt das Akkusymbol. Bei vollständiger Ladung hört das Akkusymbol auf zu blinken.

-Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.

【Vorbereitung vor der Anwendung】

- Wählen Sie die für Sie geeignete Lotion und tragen Sie diese gleichmäßig auf den Behandlungsbereich auf.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch oder Wattepad.
- Verwenden Sie es auf sauberer Haut oder nach dem Baden.



Ganzkörpermassage



Gesichtsmassage
Wählen Sie den Modus nach Ihren Bedürfnissen und führen Sie die Bewegungen vom Kinn über die Wange bis zum Ohr in aufwärts gerichteten Bewegungen aus



Augenmassage
Wählen Sie den Modus nach Ihren Bedürfnissen, führen Sie aufwärts gerichtete Bewegungen im äußeren Augenbereich aus, vermeiden Sie den Kontakt mit Augenlidern oder den Augen selbst



Schulter- und Nackenmassage
Wählen Sie den Modus nach Ihren Bedürfnissen, führen Sie die Bewegungen von der Schulter zum oberen Nacken



Stirnmassage
Wählen Sie den Modus nach Ihren Bedürfnissen, gleiten Sie mit aufwärts gerichteten Bewegungen über Ihre Stirn




Handmassage
Wählen Sie den Modus nach Ihren Bedürfnissen, gleiten Sie über Ihren Unterarm



Beinmassage
Wählen Sie den Modus nach Ihren Bedürfnissen, gleiten Sie über Ihre Wade

Gua Sha Schieben und Schaben

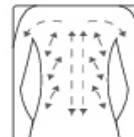

Rücken



Bein



Hand

Gesichtsschönheit



1. Reiniger



2. Lotion/Öl



3. Warme Straffung



4. Gesichtsmaske

V-Face Lifting und Straffung



V-Face Lift

Heben Sie die Höhe des Wangenmuskel von der Seite des Kinns aufwärts entlang der Kieferlinie



Reduzierung der Erscheinung von Linien

Heben Sie von dem seitlichen Ende der Nase oder dem Mundwinkel entlang der äußeren Kontur des Wangenknochens zum Ohrfläppchen



Reduzierung von Stirnlinien

Beginnen Sie über den Augenbrauen und heben Sie von unten bis zum Haaransatz



Beseitigung von Augentaschen

Beginnen Sie unter dem Augenwinkel und folgen Sie der Kurve des äußeren Auges bis zur Schläfe.

5. Pflege und Wartung

- Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät aus.

-Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.

-Verwenden Sie keine scharfen, ätzenden oder flüchtigen Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch oder Wattepad zum sanften Abwischen.

-Spülen Sie das Gerät nicht direkt mit Wasser ab, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.

6. Zu beachtende Punkte

1. Dieses Produkt ist ein Pflegegerät, kein medizinisches Gerät und hat keine therapeutische Wirkung. Wenn Sie Behandlung, Medikamente usw. benötigen, konsultieren Sie bitte einen Facharzt oder eine entsprechende Person.

-Wir gewähren eine 1-jährige Garantie für das Produkt, die Garantiezeit beginnt ab dem Kaufdatum.

- Während der Garantiezeit ersetzen wir je nach Fall die Teile oder das gesamte Produkt aufgrund von Material- oder Produktionsfehlern.

-Um Garantie zu beantragen, müssen das Produkt und der Kaufbeleg

(Kaufbeleg), der das Kaufdatum belegt, bei einer autorisierten Reparaturstelle oder dem Werk für den Kundendienst eingereicht werden.

--Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für folgende Bedingungen:

--Schäden durch unsachgemäße Verwendung, wie: Verwendung der falschen Stromversorgung, Anschluss des Produkts an eine ungeeignete Steckdose, vom Menschen verursachte Schäden usw.

--Die durch normale Nutzung verursachte Alterung und Abnutzung des Produkts, die jedoch wenig Einfluss auf die Gebrauchsfunktion des Produkts hat.

--Verwendung für andere Zwecke oder unsachgemäße Bedienung oder nicht-professionelle Wartung oder Verwendung von nicht vom Unternehmen stammenden Zubehörteilen, die zu Produktproblemen führen

--Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere Verbrauchsartikel.

--Schäden durch höhere Gewalt (wie Blitzschlag, Erdbeben, Feuer, Überschwemmung usw.).

Der Kundenservice deckt auch keine Schäden ab, die durch die oben genannten Gründe verursacht wurden.

7. Abfallentsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung oder Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde über das Recycling gemäß der Abfallklassifizierung.



8. Umweltschutz

Diese Kennzeichnung auf diesem Produkt oder Verpackungsmaterial oder Zubehör weist darauf hin, dass dieses Material aus recycelbaren Materialien hergestellt ist. Trennen Sie Abfälle in verschiedene Recyclingklassen, um das Recycling nützlicher Materialien zu erleichtern



9. Technische Parameter und Verpackung

Produktname: Heiß- & Kalt-Halspflegegerät

1. Gesamtabmessungen: 151,8*80,8*40mm;

2. Nettogewicht: Etwa 142g;

3. Material: ABS+PC+Zinklegierung+Silikon;

4. Akkukapazität: 800mAh

5. Lademethode: USB-Kabel, 5V/1A;

6. Wasserschutzklasse: IPX0

7. Packungsinhalt: Hauptgerät *1, USB-Ladekabel *1, Bedienungsanleitung *1

Hinweis: Im Hinblick auf die konsequente Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich das Unternehmen das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern, und das tatsächliche Produkt kann vom gelieferten abweichen.

Made In Chian
FCC E

